




Серия ОМА

Ротаметр кислорода

Используется для индикации и ручного управления потоком кислорода

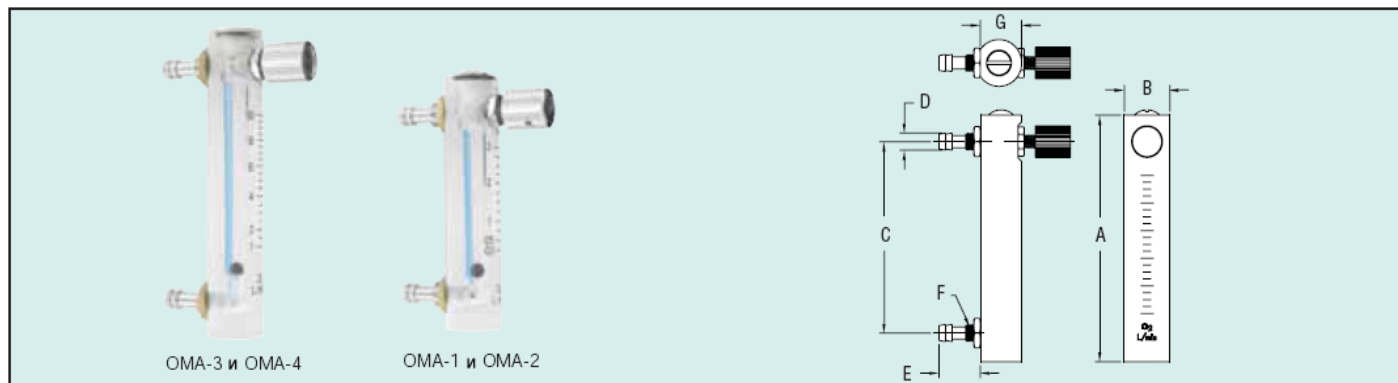

Компактный ротаметр кислорода серии ОМА специально сделан для медицинских применений и ручного контроля потока от генераторов кислорода. Уровни потока поддерживаются стабильными с помощью прецизионного клапана и ручки настройки. Этот дешевый расходомер делается из прочного прозрачного акрилового пластика. Легко читаемая шкала выполнена горячей штамповкой в акриловом пластике так, что она не будет стираться. Шариковый поплавок хорошо виден на светло-голубом фоне. Показания повторяются в пределах точности $\pm 4\%$ для полной шкалы.

Модель	Шкала (л/мин)
ОМА-1	0,1 – 1,5
ОМА-2	0,3 – 3
ОМА-3	0,5 – 5
ОМА-4	1,0 - 10

ГАБАРИТЫ (ММ)		
	Модель ОМА-1 и ОМА-2	Модель ОМА-3 и ОМА-4
A	95,25	116,28
B	$\varnothing 22,23$	$\varnothing 22,23$
C	70,25	90,09
D	$\varnothing 8,33$	$\varnothing 8,33$
E	20,24	20,24
F	M10x1	M10x1
G	20,24	20,24

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения: Кислород.

Смачиваемые материалы: Акрил и латунь с электролитическим покрытием.

Шариковый поплавок: Нержавеющая сталь (ОМА-1); Агат (ОМА-2, -3, -4);

Кольцо круглого сечения: Нитрил бутадиеновая резина (NBR).

Пределы по давлению: 2,0 бар.

Температурные пределы: 0-60 С.

Точность: $\pm 4\%$ для полной шкалы.

Присоединение: Трубка с внутренним диаметром $\frac{1}{4}$ " NPT.

Монтажная ориентация: Вертикальная.

A-222, Трубка с внутренним диаметром 0,240" x внешний диаметр 0,375".

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: drw@nt-rt.ru || Сайт: <http://dwyer.nt-rt.ru/>